

小型真空行星离心混料机（2个 15ml 混料罐）MSK--PCE-V2150

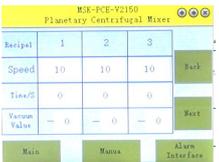


MSK-PCE-V2150 是一款小型的真空行星式离心混料机用于混合或脱泡，适用样品有液体，浆料，糊状物和粉末。此款设备部也可用于混合和均质化纳米粉，纳米管，陶瓷粉末，电池粉末/浆料和金属粉末等。

此款小型设备不可在 Ar 环境下的手套箱中工作

技术参数

产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 可在真空环境下混料和对样品脱泡（脱泡效果更好）• 带有自动和手动操作模式• 罐体公转和自转相结合达到最好的混料效果• 可显示腔体温度• 设备尺寸小可放入手套箱内使用（N₂ 环境下使用，不可在 Ar 环境下
------	---

	<p>使用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 对样品污染较小 (无研磨球和搅拌桨) 可同时对样品混合, 分散和排气 可同时放入 2 组样品进行处理 												
<p>电压&功率</p>	<ul style="list-style-type: none"> AC208~240V 单相, 50/60Hz 最大功率: 1000W 												
<p>混合</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 行星式离心真空混料 自转和公转的离心力使材料对, 均质化 在真空环境下, 能更有效低排除材料中的气体 												
<p>真空</p>	<ul style="list-style-type: none"> -0.085MPa 设备标准配置中不包含真空泵, 可在本公司购买真空泵 												
<p>工作时间</p>	<p>1-999 秒</p>												
<p>转速</p>	<ul style="list-style-type: none"> 固定速度比: 罐体自转速度=公转速度×0.6 行星盘转速 (公转速度): 10-2000rpm 低速状态: 10-1499rpm. 连续运转, 精度 1rpm 高速状态: 1500-2000rpm, 最大 7,5 分钟 												
<p>罐体和承载重量</p>	<p>标配 2 个 150ml 尼龙混料罐, 可选购 30ml 尼龙混料罐</p> <table border="1" data-bbox="472 1514 1461 1644"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>罐体容积</th> <th>最大可放样品体积</th> <th>最大样品质量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标配</td> <td>150ml</td> <td>75ml</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>可选</td> <td>30ml</td> <td>15ml</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	形式	罐体容积	最大可放样品体积	最大样品质量	标配	150ml	75ml	150g	可选	30ml	15ml	
形式	罐体容积	最大可放样品体积	最大样品质量										
标配	150ml	75ml	150g										
可选	30ml	15ml											
<p>控制面板</p>	<ul style="list-style-type: none"> 触摸屏操作面板 在自动模式中, 可存储 8 条程序 (图 1) 3 个可编程段: 速度, 时间和真空值 (图 2)   <p>图 1 图 2</p>												
<p>安全和保护</p>	<ul style="list-style-type: none"> 集成安全警报和互锁。以下情况设备将自动停止运行 												

	<ul style="list-style-type: none"> • 样品过载 • 2 个罐体中的样品质量不平衡过载 • 顶部机盖打开
质保	一年质保期，终生维护
尺寸	 <p>430mm(L) X 310mm(W) X 460mm(H)</p>
重量	60kg